

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bbbraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на аппараты и принадлежности для Н.Е.Л.Р.-афереза компании **B. BRAUN**

Виды товаров: аппараты для экстракорпорального вида лечения, фильтры плазмы, преципитатные фильтры, гепарин-адсорбент, ультрафильтры, физиологические растворы, наборы магистралей, бикарбонатные растворы для диализа, гепарин, ацетатные буферы и др.

Plasmат® Futura — Это аппарат для проведения Н.Е.Л.Р.-афереза (гепарин-индуцированной экстракорпоральной преципитации ЛПНП) — процедуры экстракорпорального очищения крови для лечения нарушений липидного обмена, которое не поддаётся лечению обычными методами. Эта эффективная процедура удаляет не только ЛПНП и холестерин, но также снижает факторы риска с атеросклеротическим эффектом (например, липопротеин, фибриноген, воспалительные факторы).



PlasmатFutura

Аппарат Plasmат® Futura является универсальным аппаратом, предназначенным для проведения как постоянных, так и периодических процедур внепочечного очищения плазмы, таких как плазмофильтрация и плазмаферез. Его можно эксплуатировать в различных условиях вне зависимости от качества воды и напряжения в сети. Этот уникальный аппарат разработан на базе передовых технологий, оснащен широким набором программ лечения, что позволяет проводить любые варианты плазменной терапии, известные на сегодняшний день. Автоматическое выполнение ряда операций, таких как заполнение плазмофильтра, ячейки гепарина, фильтра ультрафильтрации, а так же слив отработанных растворов позволяют медицинскому персоналу значительно экономить время на обслуживание аппарата и больше внимания уделять пациенту. Plasmат® Futura не требует подсоединения к постоянному источнику воды и, таким образом, не требует использования дорогостоящих обратноосмотических установок.


Plasmат® Futura не требует использование растворов концентратов и растворов для

проведения дезинфекции и декальцификации. Преимущества Plasmат® Futura:

- Эффективное удаление липопротеинов и фибриногена позволяет достичь хороших результатов лечения
- Использование упрощенной системы магистралей и фильтров упрощает обслуживание аппарата
- Автоматическое выполнение ряда процедур позволяет экономить время обслуживания аппарата

Аппарат оснащён готовым к применению полным комплектом расходных материалов для проведения LDL-афереза.

Ультрафильтр удаляет излишки ацетатного буфера и возвращает уровень pH плазмы к его физиологическому значению.

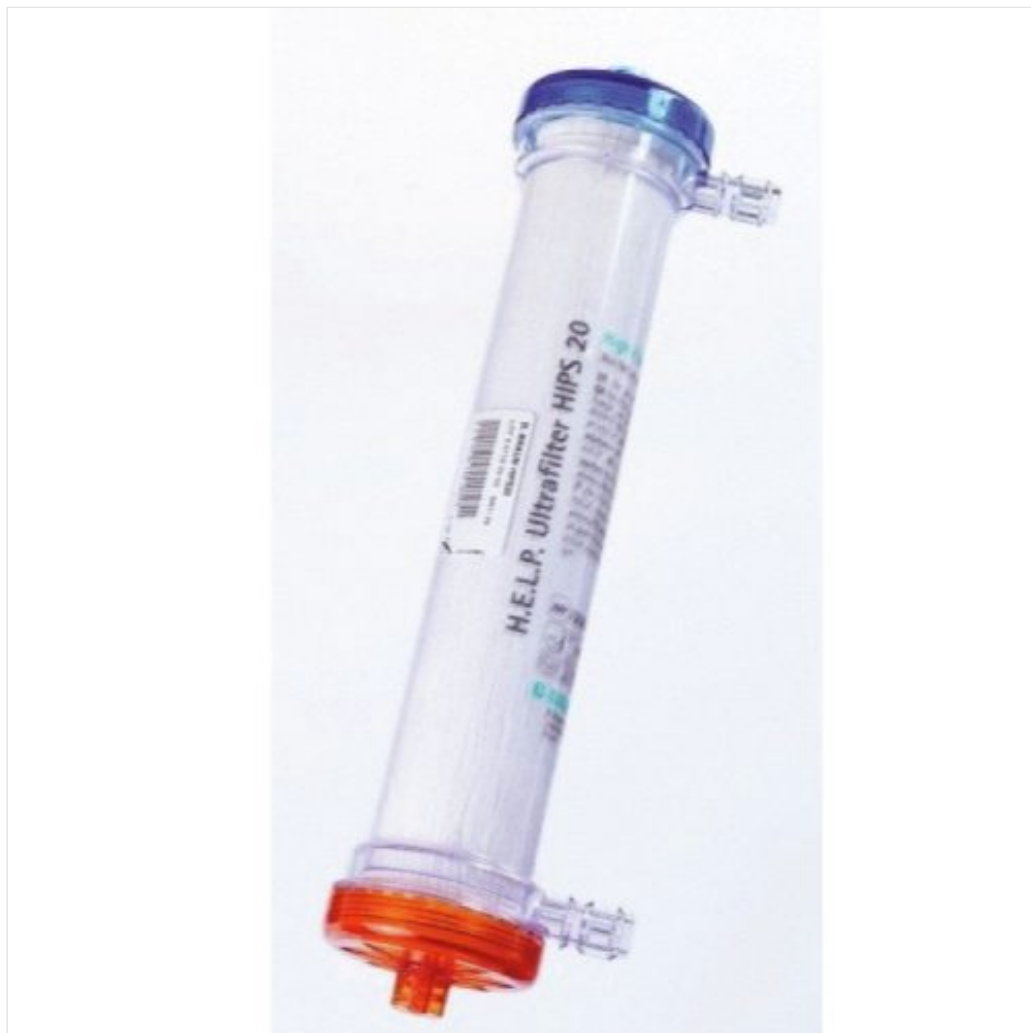

HELP Ultrafilter

Фильтр полуволоконной мембраны из полисульфона для H.E.L.P.-аферез.

- Стерильный и апиrogenный
- Стерилизован этиленоксидом
- Действующая площадь поверхности материала: 2,0 м
- Объем заполнения: 121 мл
- Внутренний диаметр волокна: 200 мкм
- Толщина стенки: 40 мкм
- Максимальное трансмембранное давление: 600 мм рт.ст.
- Коэффициент ультраfiltrации: 58 мл мм рт.ст.-1 ч-1

Дополнительная информация

Ультрафильтр HIPS 20 H.E.L.P. - компонент набора для проведения H.E.L.P.-афереза. Предназначен для проведения плазмафереза на аппарате Plasmate Futura и только для одноразового использования.

Удаляет излишки гепарина из плазмы



Heparin Adsorber

Адсорбер для экстракорпоральной адсорбции гепарина при проведении Н.Е.Л.Р.-афереза.

- Капиллярный фильтр с модифицированной DEA полиамидной мембраной из диэтаноламин модифицированного полиамида
Стерильный и апиrogenный
- Стерилизованный этиленоксидом
- Емкость адсорбера $\geq 400,000$ ME
- Объем заполнения: 150 мл


Дополнительная информация

Гепарин-адсорбент является компонентом набора для проведения Н.Е.Л.Р.-афереза на аппарате Plasmate Futura. Он предназначен для адсорбции свободного гепарина из плазмо-буферной смеси при проведении Н.Е.Л.Р.-афереза. Предназначен только для одноразового использования.

Сопутствующие продукты



Аппарат для
экстракорпорального
вида лечения Plasmat
Futura (Пласмат-

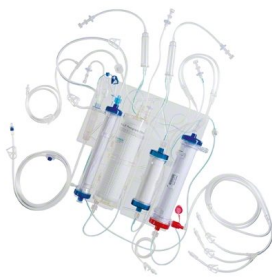

Набор магистралей
Н.Е.Л.Р.

Больше



Ацетатный буфер
Н.Е.Л.Р.®

Больше

Продукция

Гепарин-адсорбент Н.Е.Л.Р. 400

7210919

Удаляет из плазмы комплексы гепарин-липопротеин.
Микropopистая мембрана произведена из полиэтерсульфона.
Эффективная площадь поверхности мембраны 0,45 м²



H.E.L.P. Precipitatefilter

Преципитатный фильтр является неотъемлемой частью набора для Н.Е.Л.Р.-афереза. Предполагается отделение методом преципитации белково-гепариновых комплексов от плазменно-буферной смеси в ходе Н.Е.Л.Р. терапии на аппарате Plasmate Futura.

- Стерильный и апиrogenный
- Стерилизован этиленоксидом
- Материал: полиэтерсульфон
- Эффективная площадь поверхности: 0,45 м
- Объем заполнения: 800 мл
- Только для одного применения

Фильтр плазмы Гемоселект фильтр 0,5 Н.Е.Л.Р.

Отделяет плазму от клеточных компонентов.
Мембрана произведена из полиэтерсульфона.
Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м².




Plasmafilter Haemoselect

Плазмофильтр Haemoselect 0,5/0,7 с полым волокном, состоящим из полиэтерсульфона, является неотъемлемой частью Н.Е.Л.Р. афереза и используется для отделения плазмы в аппарате для проведения Н.Е.Л.Р.-афереза Plasmal Futura.

- Действующая площадь поверхности материала: 0,45 м²
- Размер пор: 0,5 / 0,7 мкм
- Коэффициент просеивания альбумина
- Иммуноглобулины и липопротеины: ~ 1
- Объем заполнения со стороны крови: 50 мл
- Сторона плазмы: 125 мл
- Внутренний диаметр волокна: 300 мкм
- Толщина внутренней стенки: 100 мкм
- Макс. трансмембранное давление: 80 мм рт.ст.
- Максимальный кровоток: 180 мл / мин
- Корпус: поликарбонат
- Пенополиуретан

Плазмофильтр стерилизуют этиленоксидом и только для одноразового использования.

Стерильный набор расходных материалов для аппарата Plasmат® Futura.

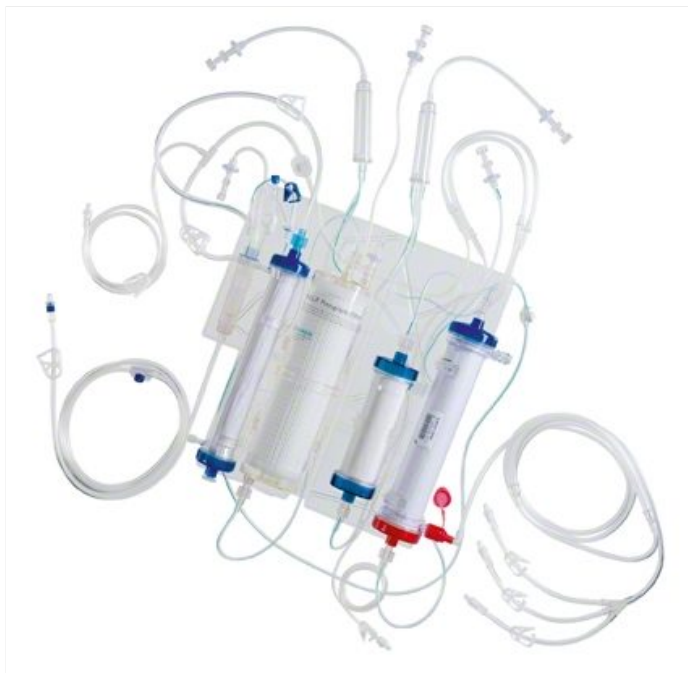

Plasmат Futura Kit

Сопутствующие продукты



Аппарат для
экстракорпорального вида
лечения Plasmат Futura
(Пласмат-Футура)



Фильтр плазмы
Гемоселект фильтр 0,5
Н.Е.Л.Р.
Больше



Гепарин-адсорбент
Н.Е.Л.Р.
Больше



Преципитат
Н.Е.Л.Р.
Больше

Не вся продукция зарегистрирована и допущена для использования во всех странах или регионах. Показания к применению могут отличаться в зависимости от страны или региона. Пожалуйста, обращайтесь к местному представителю компании для получения информации о продукции. Изображения продукции приведены исключительно для получения общего представления

NaCl 0.9% B. Braun

Физиологический раствор



NaCL 0.9 B. Braun

Стерильный и апиrogenный

Преимущества

Флакoн Ecobag®:

- 2 порта
- не содержит латекс и PVC
- не бьющийся материал

Ключевые характеристики

Представлен во флаконах объемом 250, 500 и 1000 мл

Показания

Используется для подготовки системы к проведению процедуры гемодиализа, а также для разведения и инфузии препаратов.

Натрий-ацетатный буфер для экстракорпоральной регуляции pH плазмы



H.E.L.P. Acetate Buffer

Стерильный натрий-ацетатный буфер для экстракорпоральной регуляции pH плазмы при проведении H.E.L.P.-терапии на аппарате Plasmatech Futura. Предназначен только для экстракорпорального применения при проведении H.E.L.P.-афереза. Стерилизация паром, не содержит эндотоксины.

Гепарин для преципитации липопротеина при экстракорпоральном очищении крови



Н.Е.Л.Р. Heparin

Флакон содержит 40 мл стерильного раствора гепарина натрия для экстракорпорального очищения плазмы крови при проведении процедуры Н.Е.Л.Р.-терапии на аппарате Plasmatic Futura. Н.Е.Л.Р. гепарин входит в набор для проведения Н.Е.Л.Р. афереза и предназначен только для экстракорпоральной преципитации ЛПНП холестерина, липопротеина (а) и фибриногена. Стерилизация проведена с использованием асептических методов обработки, без эндотоксинов.

Дополнительная информация

Изделие медицинского назначения, не предназначено для инъекций. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению!

Бикарбонатный раствор для диализа




Н.Е.Л.Р. BicEI

Бикарбонатный раствор Н.Е.Л.Р. является частью набора для лечения на аппарате Н.Е.Л.Р. Futura. Готовый к использованию стерильный раствор используется для восстановления физиологических параметров плазмы. Стерилизация паром, не содержит эндотоксинов

Набор магистралей Н.Е.Л.Р.

Стерильный набор расходных материалов для аппарата Plasmат® Futura.

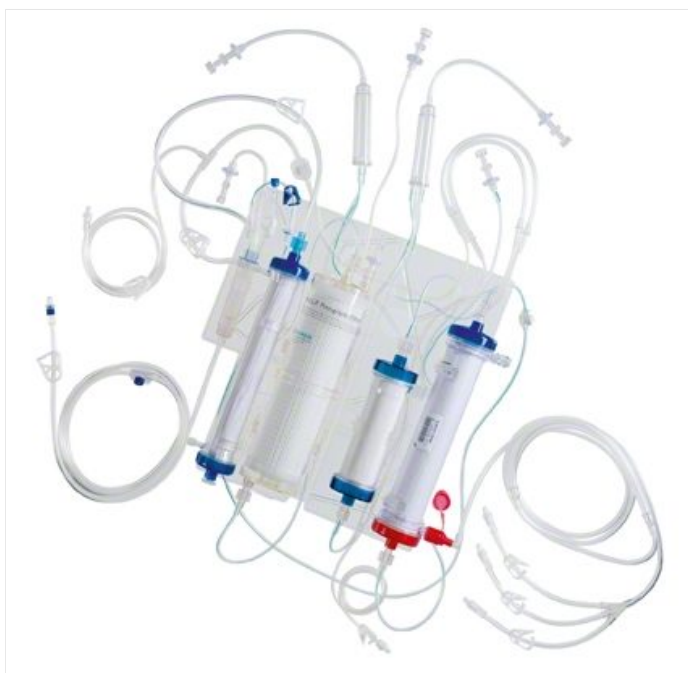

Plasmат Futura Kit

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru